

加圧式医薬品注入器

ベセルフューザー

IV-PCA

過量投与
防止機構

ISO80369-7 血管内又は皮下注射器用途のコネクタ

フローコントローラー付き
PCAタイプPCA
ポールス
1mL持続流量
「8段階」
(OFF含む)


100mLタイプ

60mLタイプ

独自技術の流量制御チューブを採用

AuBEXの独自技術「Snowcrystal technology」

雪の結晶のような円腔形状により微量な薬液流量制御を可能にしました。

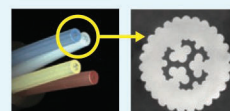

(代表例)

PCAタイプ


100mLタイプ

60mLタイプ

過量投与防止機構付きPCA用装置



PCA用装置内の薬液ラインは、ボーラス投与时、貯留時にかかわらず、常にどちらか片方の薬液ライン弁が閉鎖しているので、ボーラス以上の薬液は投与されません。

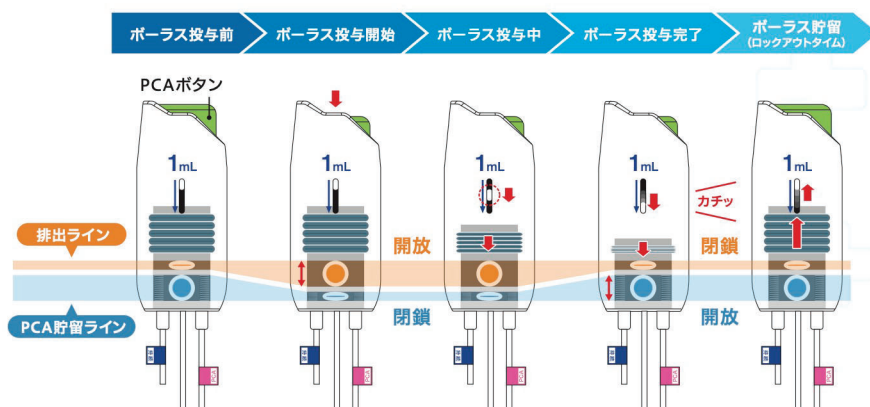

常にどちらか片方の薬液ラインが閉鎖しているので、ボーラス以上の投与はされない。

【フローコントローラー付きPCAタイプ】

[SPEC]

高度管理医療機器 販売名:ベセルフューザー 医療機器承認番号:20600BZZ01302000

ボトル容量	100mL	持続流量	可変式 [OFF, 0.5~3.5mL/hr (0.5mL/hrステップ)]
ボーラス量	1mL/1回	ロックアウトタイム	10min
製品番号	VFFP-IV100-F0535P1A	販売単位	10個/1箱

ボトル容量	60mL	持続流量	可変式 [OFF, 0.5~3.5mL/hr (0.5mL/hrステップ)]
ボーラス量	1mL/1回	ロックアウトタイム	10min
製品番号	VFFP-IV60-F0535P1A	販売単位	10個/1箱

【PCAタイプ】

[SPEC]

ボトル容量	100mL	持続流量	1mL/h r
ボーラス量	1mL/1回	ロックアウトタイム	10min
製品番号	VFP-IV100-10601P1A	販売単位	10個/1箱

ボトル容量	60mL	持続流量	1mL/h r
ボーラス量	1mL/1回	ロックアウトタイム	10min
製品番号	VFP-IV60-10601P1A	販売単位	10個/1箱

[保険算定]

特定保険医療材料価格基準	019	携帯型ディスポーザブル注入ポンプ (3)PCA型	¥4,270-
--------------	-----	--------------------------	---------

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。ご使用前に、電子添文、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

[製造販売業者]

オーベクス株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国 4-31-11 ヒューリック両国ビル9階
[お問合せ] TEL: 03-6701-3035 (メディカル事業部)

<https://www.aubex.co.jp>

